

— 歯科医師考案 —

一般医療機器：口腔・嚥下機能訓練器具  
医療機器届出番号：13B3X10185000067

# キープアツプケア

舌トレで、口腔・嚥下機能改善

簡単なカスタマイズで、らくらく口腔・嚥下トレーニング



日・米特許取得  
形状特許 特許4360688号



オーラルフレイル対策

- ・小児のMFTに
- ・発音・発声トレーニング
- ・耳抜きトレーニング ets

# ハンズフリーで、いつでも舌トレ

## キープアップケア（ユース）とは


強化、運動指導しにくい口腔・嚥下機能をトレーニングする器具

キープアップケア

上方図



背面図

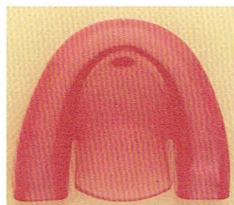

キープアップケアユース

上方図



背面図



## キープアップケア（ユース）の6つの特徴

1. 軟らかい素材（EVA樹脂・熱可塑性）を使用。
2. ハンズフリーで、嚥下運動に順じた舌筋群をトレーニング。
3. お湯で、簡単にカスタマイズでき多様な口腔環境に対応。
4. 咬合部をかむことで、咀嚼筋群をトレーニング。
5. お口を閉じて、口周りの筋群をトレーニング。
6. 発音・発声および耳抜きトレーニング。

キープアップペレット  
(充填適合材料)



## 使用方法

上顎に装着し、突起に舌尖をつけたままで斜面板を舌全体で押し上げます。  
装着したまま「だ液」を飲みこみ嚥下を繰り返す。  
継続・習慣化してもらうことが、ポイントです。

舌の吸盤化



## 種類（硬さ・軟化温度）

スタート（60℃以下） ソフト（70℃以下） ミディアム（80℃以下）

ご用命は

製造販売元：有限会社イオス

東京都八王子市大船町660

TEL：042-668-8625