

CJ クラウンジュン

厳選された縫合糸と特殊加工により製造された針を使用して、
 歯科用針付縫合糸のラインアップを揃えました。
 術式に合わせたものを以下のシリーズよりお選びください。
 (EOG滅菌済) ※特注の針付縫合糸もお受けします。

| 注文番号 | 針の種類 | | | 糸の種類とサイズ | | | 本数 |
|-------|------|------------|-----|----------|------|------|----|
| | 実寸 | 形状 | サイズ | 種類 | 糸長さ | | |
| No.1 | 17mm | 強弯 逆三角 1/2 | 4-0 | 黒ブレイドシルク | 45cm | 12本入 | |
| No.2 | 22mm | 強弯 逆三角 1/2 | 3-0 | 黒ブレイドシルク | 45cm | 12本入 | |
| No.3 | 22mm | 強弯 逆三角 1/2 | 4-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.4 | 19mm | 弱弯 逆三角 3/8 | 4-0 | 黒ブレイドシルク | 45cm | 12本入 | |
| No.5 | 19mm | 直針 Vカット | 3-0 | 黒ブレイドシルク | 45cm | 12本入 | |
| No.6 | 15mm | 強弯 丸針 1/2 | 4-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.7 | 17mm | 強弯 丸針 1/2 | 3-0 | 黒ブレイドシルク | 45cm | 12本入 | |
| No.8 | 19mm | 弱弯 逆三角 3/8 | 4-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.9 | 17mm | 強弯 逆三角 1/2 | 4-0 | 白ブイゾーブ | 70cm | 12本入 | |
| No.10 | 22mm | 強弯 逆三角 1/2 | 3-0 | 紫ブイゾーブ | 70cm | 12本入 | |
| No.11 | 17mm | 強弯 逆三角 1/2 | 3-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.12 | 22mm | 強弯 逆三角 1/2 | 3-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.13 | 15mm | 強弯 逆三角 1/2 | 4-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.14 | 17mm | 強弯 逆三角 1/2 | 4-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.15 | 22mm | 強弯 逆三角 1/2 | 4-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.16 | 15mm | 弱弯 逆三角 3/8 | 4-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.17 | 17mm | 弱弯 逆三角 3/8 | 4-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.18 | 19mm | 弱弯 逆三角 3/8 | 4-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.19 | 17mm | 強弯 丸針 1/2 | 4-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.20 | 15mm | 弱弯 丸針 3/8 | 4-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |

歯科用針付縫合糸



| 注文番号 | 針の種類 | | | 糸の種類とサイズ | | | 本数 |
|-------|------|------------|-----|----------|------|------|----|
| | 実寸 | 形状 | サイズ | 種類 | 糸長さ | | |
| No.21 | 13mm | 弱弯 丸針 3/8 | 5-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.22 | 11mm | 弱弯 丸針 3/8 | 6-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.23 | 8mm | 弱弯 丸針 3/8 | 7-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.24 | 19mm | 直針 Vカット | 4-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.25 | 17mm | 強弯 逆三角 1/2 | 4-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.26 | 17mm | 強弯 逆三角 1/2 | 5-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.27 | 15mm | 弱弯 逆三角 3/8 | 5-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.28 | 15mm | 強弯 平型 1/2 | 5-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.29 | 13mm | 弱弯 平型 3/8 | 5-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.30 | 17mm | 強弯 丸針 1/2 | 5-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.31 | 13mm | 弱弯 丸針 3/8 | 5-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.32 | 15mm | 弱弯 丸針 3/8 | 5-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.33 | 15mm | 強弯 平型 1/2 | 6-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.34 | 11mm | 弱弯 平型 3/8 | 6-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.35 | 15mm | 強弯 丸針 1/2 | 6-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.36 | 11mm | 弱弯 丸針 3/8 | 6-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.37 | 8mm | 弱弯 平型 3/8 | 7-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.38 | 8mm | 弱弯 丸針 3/8 | 7-0 | 黒ナイロン | 45cm | 12本入 | |
| No.41 | 15mm | 弱弯 逆三角 3/8 | 5-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |
| No.42 | 15mm | 強弯 丸針 1/2 | 6-0 | 緑テフデッサーⅡ | 45cm | 12本入 | |

※No.39・40は廃番になりました

販売元 株式会社 **シバタ**

〒110-0005 東京都台東区上野5-25-17
 TEL 03-3836-4811 FAX 03-3836-2585 E-mail: info@dental-shibata.co.jp

製造販売元 株式会社 **河野製作所**

〒272-0832 千葉県市川市曾谷2-11-10



- ① 一目で必要な情報が分ります。
- ② ニードルウィンドウ
狙い通りのポイントで針を把持できます。
- ③ プロテクションカバー
針刺し事故を予防します。
- ④ ユニークなレール形状
巻き癖を極力おさえ、スムーズに取り出せます。

縫合糸の種類

● 緑テフデッサーⅡ縫合糸(非吸収性)(ブレイド糸)

PTFEコーティングポリエステル合成縫合糸。

**ブランクや血液が付きにくい為、
組織通過性が良く、感染防止に役立ちます。**

優れた抗張力を持つポリエステル編糸です。
特殊コーティングにより、優れた組織通過性と感染防止に役立ちます。

**操作性が良く、結紮がスムーズに行え、
確実に締まります。**

特殊加工により、結紮時の緩みを少なくし、より絹糸に近い高い結紮性能を実現しました。

● ブレイドシルク縫合糸(非吸収性)(ブレイド糸)

原糸としてより細い絹糸を使用し、絹糸本来の柔らかさと高い操作性が特徴です。

● ナイロン縫合糸(非吸収性)(モノフィラメント糸)


強い結紮抗張力を持っております。組織通過性が良く、組織反応は極めて少なくなっております。

● ブイゾーブ縫合糸(吸収性)(ブレイド糸)


ポリグリコール酸100%を使用した合成吸収性縫合糸です。
優れた結紮保持性と組織通過性が特徴です。

- ・モノフィラメント糸とは：単一のフィラメントからなるもの
- ・ブレイド糸とは：複数のフィラメントを編み上げたもの
- ・吸収糸とは：一定期間は創部を維持する抗張強度を有した後、加水分解などで経時的に体内に吸収されるもの
- ・非吸収糸とは：生体内で分解・吸収されずずっと残存するもの


緑テフデッサーⅡ

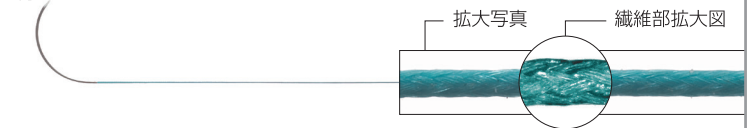


ブレイドシルク

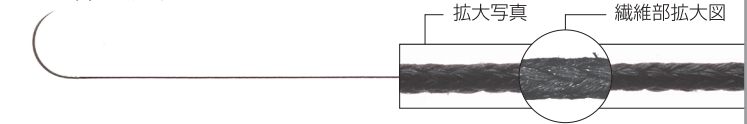

ナイロン

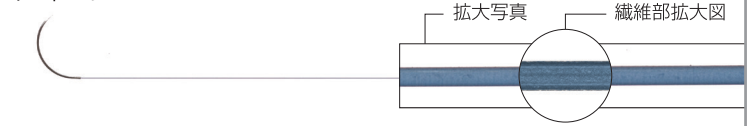

ブイゾーブ

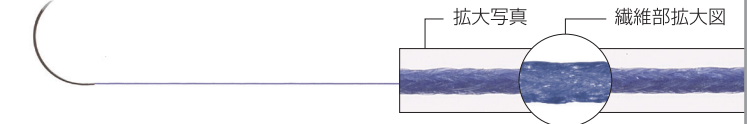

承認番号(高度管理医療機器)


針付テフデッサーⅡ 16100BZZ00938000
針付ブレイドシルク縫合糸 16100BZZ01126000
針付ブイゾーブ 20800BZZ00005000

認証番号(高度管理医療機器)

針付ナイロン縫合糸 229AFBZX00015000


針の種類

■ 逆三角針

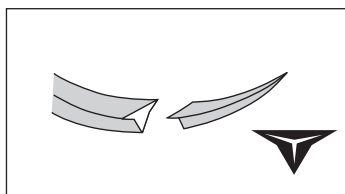


針断面が逆三角になっており、刃が彎曲の外側についています。硬く刺しにくい部所に使用されています。

■ 丸針

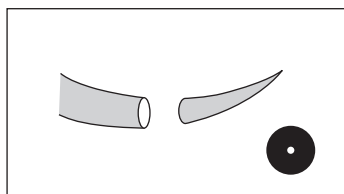


先端が細く鋭くなっています。柔らかく刺ししやすい「軟組織」に使用されています。傷口が小さく抑えられます。

■ 平型針

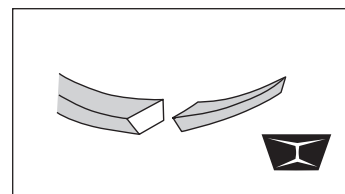

針断面が台形状になっております。特に切れ味が優れております。

■ Vカット

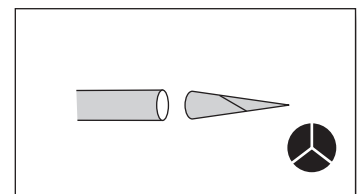

刃を上面にたて加工を施しております。特に硬く刺しにくい部所の切れ味が優れております。

販売元 株式会社 **シバタ**

〒110-0005 東京都台東区上野5-25-17
TEL 03-3836-4811 FAX 03-3836-2585 E-mail: info@dental-shibata.co.jp

製造販売元 株式会社 **河野製作所**
〒272-0832 千葉県市川市曾谷2-11-10